

Diinsel Vet®

EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**
PRUEBAS RÁPIDAS PARA **DIAGNÓSTICO VETERINARIO**

Prueba rápida de antígeno Giardia

Canino y felino



El Dispositivo de Prueba de Antígenos Giardia Lamblia está destinado para la detección cualitativa de antígenos (Ag) de Giardia Lamblia (Gia) de las heces caninas o felinas.


ESPECIFICACIONES

- **Contenido:** 20 Pruebas, 20 buffer y 20 hisopos.
- **Muestra:** Heces caninas o felinas.
- **Tiempo de prueba:** 5-10 minutos.
- **Duración:** 24 meses.
- **Almacenamiento:** 2-30° C

MODO DE USO

- 1 Recoja la muestra de heces caninas o felinas dos veces con el hisopo proporcionado.
- 2 Desprenda la tapa del tampón diluido y coloque el hisopo en el tubo del tampón.
- 3 Gire de 6 a 8 veces el hisopo a lo largo de los lados de la botella del tampón.
- 4 Deje reposar durante 2 minutos y coloque la tapa.
- 5 Coloque 3 gotas de la muestra en el pozo del dispositivo.
- 6 Lea los resultados a los 10 minutos. *No interpretar después de 15 minutos.*

*La muestra debe realizarse dentro de la hora posterior a la recolección.

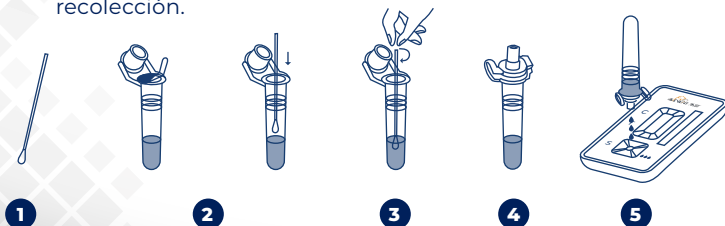

CONTROL DE CALIDAD

- Almacenar a una temperatura de 2 ~ 30 °C en un lugar fresco y seco.
- Se garantiza la estabilidad hasta la fecha de caducidad marcada en contenedores y embalajes exteriores.
- Todos los componentes deben estar a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar la prueba.
- **NO CONGELAR.** No someter a una exposición solar directa cuando no esté en uso.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



LIMITACIONES

La prueba es para uso profesional de diagnóstico in vitro, y solo debe usarse para la detección cualitativa de antígenos virales específicos por el Giardia Lamblia. Si hay un resultado positivo, confírmelo con un método de confirmación. Para otros diagnósticos clínicos adicionales, consulte al veterinario.

📞 Teléfono: 81 3606 3689

Diinsel Vet | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

